


如何进行测试？

如果您收到让您使用2个标签进行测试的信件，那么请从步骤1和步骤2开始做起，然后继续步骤3。
如果您没有信件，则直接从下面的1bis步骤开始。



1 将大标签贴到个人资料卡上。个人资料卡位于表单的中间联内。贴好后还需填写资料卡上的信息。

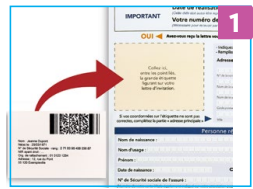

2 在小标签上标明测试日期。将标签贴到试管平坦的一面上，对应位置标有“姓名”和“日期”字样。



1 bis 仔细填写个人资料卡及其标签，它们都位于表单的中间联内。




2 bis 将标签贴到试管平坦的一面上，对应位置标有“姓名”和“日期”字样。然后继续步骤3。



3 使用自粘胶将粪便采集纸固定在马桶圈中间。轻轻地按压纸张，以便形成一个小坑形状。


重要提示：为了确保测试成功，粪便不得接触任何液体物质（包括尿液、消毒液等）。

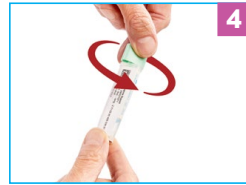

4 旋转瓶盖打开试管。



5 用棉签刮取粪便表面，需从多个不同分布点进行采集。

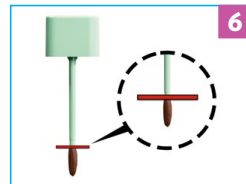


6 棉签有条痕的部分必须全部覆盖粪便。



7 盖好瓶盖后用力摇晃试管。



8 检查标签上的信息是否已经填好、标签是否正确贴于试管表面。
将试管放入保护袋中。

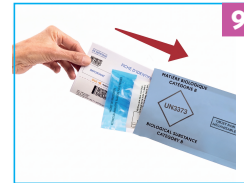

9 将下列内容装入T信封中：
• 装有试管的保护袋；
• 已经填写完备的个人资料卡。
将信封封好。



10 做完测试后必须在24小时内将T信封寄出。

测试结果会在15日之内通过信件寄给您。

如果希望通过网络收到结果，请登录
www.resultat-depistage.fr网址进行注册。

可通过如下多种渠道获取更多信息：

- 咨询您的医生。
- jefaismondepistage.fr
- 拨打**0 805 123 124**
(按本地通话费率收费)
周一至周五9:00至19:00；
周六9:00至14:00。
- 向您所在省份负责疾病筛选工作的相关机构咨询。

常见问题：

- 测试的有效使用期是多长时间？
试管表面明确标有失效日期。
- 我的试管不见了/损坏了，该怎么办？
联系您的医生，让他重新为您做测试。
- 未能按照要求正确进行采集，该怎么办？
联系您的医生，他们会提供建议，重新给您一个测试。